



1. Conectați sursa de alimentare și sonda la aparat și porniți priza de alimentare.
2. Porniți aparatul prin apăsarea butonului de alimentare din colțul din stânga sus. (A se vedea figura 1)
3. Aparatul va porni și va efectua o verificare automată. La încheierea acesteia, ecranul va fi gol, deoarece este setat la modul de repaus, dar pictograma de alimentare și alarmă va fi luminată. - Sonda pentru deget trebuie să fie luminată și să aibă culoarea **ROȘIE**. (A se vedea figura 2 pentru sonda pediatrică/sugari)
4. Fixați becuțelul roșu pe patul unghiei degetului mare de la picior sau degetului inelar de la mână și înfășurați leucoplastul în jurul acestuia.
! În cazul poziționării pe degetul inelar al mâinii nedominante, treceti cablul prin mâneca pijamalei, de-a lungul bratului, în sus și în jos, fixând cablul - asigurându-vă, astfel, că nu rămâne liberă nicio porțiune din cablu care să permită înfășurarea acestuia în jurul GĂTULUI!
! În cazul poziționării sondei pe degetul mare de la picior, fixați cablul rămas liber, lăsând doar o porțiune suficientă pentru a permite copilului să-și miste laba piciorului. Puneți o șosetă pe picior pentru a nu cădea sonda.
! Asigurați-vă că orientarea cablului este în jos, dinspre cap, și nu în sus, înspre cap.
! Îndepărtați monitorul de pat, dacă este necesar, pentru a vă asigura că nu există o porțiune mare de cablu liberă.
(În cazul în care copilul nu stă liniștit sau dacă credeți că este posibil să nu fie cooperant, lăsați-l să adoarmă ca de obicei și, după 1 oră, poziționați sonda pe unghia degetului de la picior. **Puneți o șosetă pe picior** pentru a reduce probabilitatea desprinderii sondei. Verificați înainte de a merge la culcare și în timpul nopții).
5. Verificați dacă senzorul este fixat corect prin apăsarea unuia dintre butoane, așa cum se arată în figura 3.
Ecranele vor lumina timp de 10 secunde, ambele afișând numere. Dacă apare o linie punctată sau mesajul „No SEN”, re poziționați până când apar cifre.
6. Oximetru va efectua o înregistrare pe timpul nopții.
7. Opriti aparatul dimineața ținând apăsat butonul de alimentare din colțul din stânga sus. Îndepărtați senzorul și înlocuiți foia de susținere din plastic, pentru utilizare în noaptea următoare.
8. Dacă sunt utilizate și alte monitoare pentru somnul de rutină al copilului, și acestea trebuie conectate ca de obicei. **Alarmerle au fost setate în pozitia „oprit”, iar aparatul va fi în modul silentios pentru a nu deranja somnul**
9. Vă rugăm să completați jurnalul de somn furnizat și, în cazul în care copilul este treaz pentru o perioadă mai lungă, să deconectați senzorul, dar să lăsați aparatul pornit, iar apoi, după ce copilul adoarme, să reconectați senzorul la aparat.
Este foarte important ca aparatul să fie returnat la data și ora convenite, deoarece aparatul va fi rezervat pentru un alt pacient. În cazul în care apar probleme, contactați Laboratorul de investigații pe probleme respiratorii la numărul de telefon 028 96151629. Vă rugăm să lăsați un mesaj vocal și vă voi contacta în cel mai scurt timp posibil, de luni până vineri, în orar 8:30 - 16:30.

Imagini care arată instrucțiunile de montare a aparatului pe verso ➔

Figura 1.

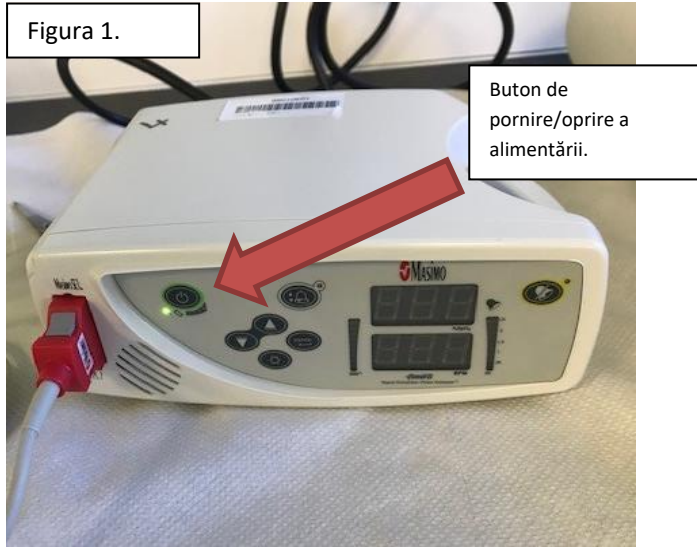



Figura 2: Sondă pentru sugar



Figura 2: Sondă pediatrică



Figura 3.

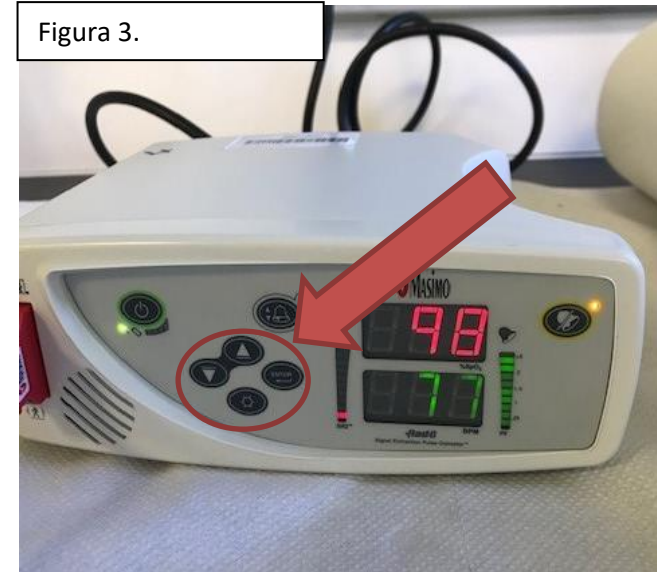

Imagini care arată instrucțiunile de montare a aparatului